



품질보증증서

- 본 제품은 엄격한 품질관리와 제품검사를 거쳐서 출고되는 제품입니다.
- 보증기간이라도 실비를 받는 경우는 다음과 같습니다.
 - 가) 사용자의 과오로 인한 고장
 - 나) 부당한 수리, 개조로 인한 고장
 - 다) 천재지변에 의한 고장 및 손상
 - 라) 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 및 손상
 - 마) 본 제품에 명시된 주의사항 불이행으로 인해 발생한 고장
 - 바) 제품 정격에 맞지 않게 사용한 후 발생한 고장
- 고객센터 및 소장품
 - 고객센터 : 1566-6884 www.lequip.kr
 - 구입문의 : 1566-6563 www.lequip.kr

제 품 명	종아리 마사지기
모 델 명	LMS-G301GYL/R
보 증 기 간	배터리 6개월/제품 1년간
구 입 일 자	년 월 일
구 입 업 체	
고 객 란	성명
	주소
	전화



- 본 보증서는 재발행이 되지 않으니 보관에 유의하십시오.
- 품질보증서는 국내에서만 유효하며 제품 구입시 공란에 기재를 하시기 바랍니다.
- 본 제품은 가정용이므로 용도 이외(영업용 등)에 사용자 무상보증서비스를 받으실 수 없습니다.

L'EQUIP | LMS-G301GY SERIES

조작 및 사용방법

기능 설명

1. 모드 : 마사지 모드는 총 4가지 모드로 변경 가능합니다. 모드별로 마사지 방식이 변경되며 마사지 모드를 설정하지 않은 경우 0으로 표시됩니다. 모드 아이콘을 터치하여 마사지 모드를 변경하여 주십시오.

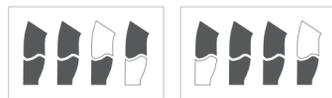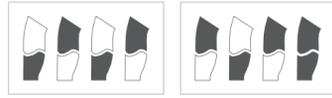

- 강도 : 강도는 총 3단계로 조절 가능하며 1단계가 가장 낮은 강도입니다. 단계가 높아질수록 마사지 강도가 강해집니다. 강도 아이콘을 터치하여 단계를 조절하여 주십시오.
- 온열 : 온열은 총 2단계로 조절 가능하며 1단계가 낮은 온도입니다. 온열 기능이 꺼져있을 때는 0으로 표시되며 온열 아이콘을 터치하여 단계를 조절하여 주십시오.
- 진동 : 진동은 총 4단계로 조절 가능하며 1단계가 가장 약한 진동 세기입니다. 진동 기능이 꺼져있을 경우 0으로 표시되며 단계가 높아질수록 진동 세기가 강해집니다. 진동 아이콘을 터치하여 단계를 조절하여 주십시오.
- 배터리표시등
 - 충전 중일 때는 제품이 작동하지 않습니다.
 - 배터리가 10% 이하일 경우 : 배터리 표시등이 빨간색으로 표시됩니다.
 - 배터리가 10% 이하 / 충전 중일 경우 : 배터리 표시등이 빨간색으로 깜박입니다.
 - 배터리가 10% 이상 / 충전 중일 경우 : 배터리 표시등이 파란색으로 깜박입니다.
 - 배터리가 완충되었을 경우 : 배터리 표시등이 파란색으로 표시됩니다.

세척 및 보관 방법

세척 방법

[본체] 본체는 안전하고 청결하게 유지되어야 하며 물기가 없는 부드러운 천으로 닦아주시고 젖은 수건이나 세제, 물 등을 사용하여 세척하지 마십시오.
[완전부] 원단부분은 물세탁이 불가하며 세탁이 필요한 경우 세제를 살짝 묻혀 젖은 물수건으로 오염부분을 문질러 닦아주십시오. (가연성 세제는 사용하지 마십시오.)

보관 방법

어린아, 유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주시고 충분한 환기, 고온, 직사광선 등의 환경에 노출시키지 마십시오. 제품을 장기간 사용하지 않는 경우, 배터리를 방전하기 위해 2개월에 한번씩 충전하여 주십시오.

폐기

본 제품은 배터리를 포함하고 있습니다. 제품을 폐기해야 하는 경우, 관할 주민센터에 문의하여 해당 지역의 규정에 따라 폐기하여야 합니다.

자주 묻는 질문

- 제품이 정상적으로 작동하지 않는 경우 아래 해결방법을 통해 점검하십시오.
- 점검 후에도 제품이 정상적으로 작동하지 않을 경우 고객센터로 문의하여 주십시오.

문제	확인	해결
공기압이 너무 낮거나 느껴지지 않아요	전원이 켜져 있는지 확인하여 주십시오.	전원 버튼을 눌러 전원을 켜주십시오.
	압박감 있게 조절하여 적용하였는지 확인하여 주십시오.	압박감 있게 조절하여 재적용하여 주십시오.
	배터리 잔량을 확인하여 주십시오.	배터리를 충전하여 주십시오.
전원이 켜지지 않아요.	배터리 잔량을 확인하여 주십시오.	배터리를 완전히 충전한 후 사용하여 주십시오.

리quip 종아리마사지기 사용설명서

L'EQUIP LEG MASSAGER | LMS-G301GY SERIES

Ver. 0

L'EQUIP LEG MASSAGER



L'EQUIP

안전 경고 사항

- 잘못된 사용으로 인한 손상을 방지하기 위해 제품 사용 전 반드시 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 기재된 지침에 따라 제품을 사용하십시오.
- 본 제품의 모든 사용자가 사용 설명서를 언제든지 참고할 수 있도록 읽고 난 후에 적절히 보관하십시오.
- 사용 중에 제품을 이동하거나 충격을 가하지 마시고 전원을 강제로 종료하지 말아주십시오. 제품 고장 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품을 직접적으로 물이나 기타 액체에 담그거나 흐르는 물에 세척하지 마시고 욕실 또는 욕탕 등 습기가 많은 곳에서 사용하지 마십시오. 감전 및 부상, 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 충전 케이블 및 제품이 손상되지 않았는지 정기적으로 점검하여 주시고, 만일 손상되었으면 제품 사용을 즉시 멈추고 반드시 리quip AS 센터에 연락하여 수리 후 사용하시기 바랍니다.
- 제품 근처에 어린이가 가까이 가지 않도록 주의하시고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 신체, 감각 또는 정신 능력이 저하되거나 경형 및 지식이 부족한 사람(어린이 포함)의 경우 안전한 방법으로 기기의 사용에 관한 감독 또는 지시를 받고 관련된 위험을 이해해야만 이 기기를 사용할 수 있습니다.
- 스티로폼, 비닐 등 포장재는 어린이가 가지고 놀지 못하도록 주의와 감독이 필요합니다. 질식의 위험이 있습니다.
- 다른 기기와 병행하여 사용하면 과부하로 인한 화재 및 감전의 위험이 있습니다. (반입기 사용이 불가 제품입니다.)
- 기기를 사용하지 않을 때 또는 조립, 분해, 청소 전에는 제품의 전원 플러그를 항상 분리하여 주십시오.
- 전원가 이외의 사람은 절대로 분해, 수리, 개조하지 마십시오. 발화 및 감전, 이상동작으로 인한 상해를 입을 수 있습니다.
- 잘못된 사용은 제품 고장 또는 상해를 입을 수 있으니 주의하여 주십시오.
- 이 기기의 모든 부품과 구성품은 제조업체가 제공한 정품이어야 하며 지침에 따라 올바르게 사용되어야 합니다. 이 기기에 맞지 않는 다른 모든 부품 또는 구성품은 엄격히 금지됩니다. 표시된 사용 용도 이외의 용도로 사용하지 마십시오.
- 인화성이나 화기가 있는 물건 혹은 전자파가 많이 발생하는 제품 가까이에서 사용하거나 취급하지 마십시오. 동유, 가솔린, 산, 담뱃불은 폭발이나 화재의 원인이 되어 타 전자기기로 인한 제품의 고장이 생길 수 있습니다.
- 기기가 외부의 타이어나 분리된 원적조정시스템에 의해 동적도로드 로동되지 않았습니까.
- 충전 시, 5V 1A 지원되는 어댑터를 사용하십시오. 과전압의 어댑터를 사용할 경우 충전 인식 불량 및 배터리 손상 등 제품의 고장 원인이 될 수 있습니다.
- 질한 또는 장애가 있을 경우 의사와 상담 후 사용하십시오.

안전 경고 사항


사용자에 따른 주의 사항

- 아래에 해당할 경우, 반드시 주의사항 및 의사의 조언에 따라 사용하여야 합니다.
- 임신 중 또는 산후의 여성
 - 심장질환 또는 고혈압 환자
 - 뇌졸중 및 신경질환 환자
 - 체내 보철기구 사용 환자
 - 외과질환
 - 골다공증 환자
 - 피부 알레르기
 - 질한 또는 장애가 있는 경우

안전 주의 사항

- 충전 케이블을 과도한 힘으로 당기거나 제거하지 마십시오. 케이블이 손상될 수 있습니다.
- 본 제품을 높은 곳에서 떨어뜨리거나 충격을 가하지 마십시오.
- 제품 청소 시 산, 벤젠, 왁스 등을 사용하지 마십시오. 제품 변색 및 외관 손상의 원인이 됩니다.
- 이 제품은 가정용입니다. 상업적인 용도 또는 야외에서 사용하지 마십시오.
- 운전 중, 수면 중에 사용하지 마십시오.
- 충전 중에는 제품이 작동하지 않습니다.
- 운열기능 사용 시, 개인에 따라 낮은 온도에서도 저온하상이 발생할 수 있으므로 짧게 사용해보는 후 점점 늘려갈 것을 권장합니다.
- 맨살에 사용을 금지하여 옷을 입더라도 저온하상이 발생할 수 있으니 위험성을 충분히 숙지하고 각별히 주의하여 주십시오.
- 맨살에 사용할 경우, 인건과 피부 마찰에 의해 접촉성 피부염이 발생할 수 있습니다. 피부염이 발생한 경우 사용을 중단하십시오.
- 압박이 너무 강할 경우, 반드시 강도 및 벨크로의 밀착 정도를 조절 후 사용하여 주십시오.
- 뽀족하고 날카로운 도구와 접촉시키지 마십시오.
- 본 제품은 배터리를 포함하고 있습니다. 제품을 폐기해야 하는 경우, 관할 주민센터에 문의하여 해당 지역의 규정에 따라 폐기하여야 합니다.
- 장기간 사용하지 않을 경우, 배터리가 방전될 수 있습니다. 2개월 주기로 확인하여 충전시켜 주십시오.

제품 구성

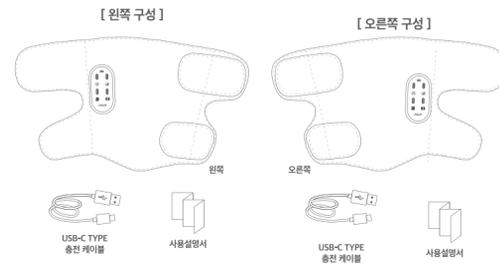

*구매하시는 구성에 따라 포함되어 있는 구성이 다를 수 있습니다.
- 개별 구매 시, 왼쪽 또는 오른쪽 구성만 포함 / 세트 구매 시, 왼쪽, 오른쪽 구성 모두 포함

조작 및 사용방법

사용방법

- 먼저, 동봉된 USB-C TYPE 케이블을 연결하여 제품을 충전하여 주십시오.
 - 충전 시, 고속충전만 지원하는 어댑터는 사용을 금지하며, 5V 1A 출력되는 어댑터를 사용하십시오. 반드시 포함된 케이블을 사용하여 충전하여 주십시오.
- 제품의 벨크로를 뜯어 왼쪽, 오른쪽을 확인하여 종아리 중앙에 배치해 주십시오.
- 종아리에 밀착시켜 알맞게 감싸 주십시오.
 - 처음에는 느슨하게 조여 사용 후 더 강한 압력을 원하실 경우 벨크로를 더 세게 조여 사용하십시오.
- 전원 버튼을 길게 눌러 전원을 켜주십시오.

조작 및 사용방법

- 모드, 강도, 온열, 진동 버튼을 터치하여 취향에 맞게 조절하여 사용하십시오.
 - 압박이 너무 강할 경우 반드시 강도 및 벨크로의 밀착 정도를 조절 후 사용하여 주십시오.
- 15분 작동 후 정지되며 화면이 꺼집니다.
 - 제품의 전원을 껐다가 재작동할 경우, 최종 사용 모드 상태로 동작합니다.

	작동환경	보관환경
온도	5°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
습도	15% ~ 90%RH	0% ~ 90%RH
기압	70KPA ~ 105KPA	70KPA ~ 110KPA

조작부

* 실제 조작부의 디스플레이는 사용자의 편의를 위해 아래와 같이 사용자의 시각 방향으로 표시되어 있습니다.

